


Test for human papillomavirus (HPV) på cervixcytologisk materiale i forbindelse med screening mod livmoderhalskræft i Region Nordjylland

- Kvinder på 60 år og derover screenes primært med HPV- **DNA**test (der skal ikke laves samtidig udstrygning)
- Kvinder der er koniserede skal ved efterfølgende cytologiske kontrol have lavet HPV- **DNA**test (der skal ikke laves samtidig udstrygning)
- Kvinder med forandringen ASCUS eller LSIL skal ved efterfølgende cytologiske kontrol have lavet HPV-**RNA**test. (der skal ikke laves samtidig udstrygning)

Der vil for de to nederste kategorier sammen med svar på cervixcytologi være anført, om kvinden ved kontrol anbefales at få udført HPV-test.

Se nedenstående vejledning i prøvetagning til ovennævnte.

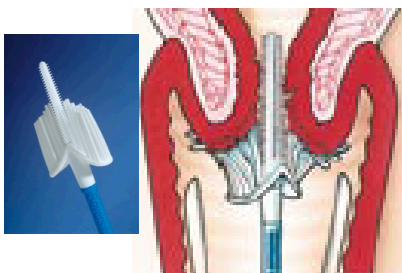


Cervex-Brush®Combi børsten føres ind i cervikalkanalen indtil børsten formes mod cervix

Drej børsten med et let vedholdende tryk **2 fulde omgange med uret** for at opnå tilstrækkeligt materiale til diagnostik

Bemærk:

- 1) Hvis børsten drejes mod uret "falder" cellerne af børstehårene
- 2) For at undgå blødning skal børsten ikke drejes mere end 2 fulde omgange


Børstehovedet anbringes straks i beholderen mærket SurePath med fikseringsvæske

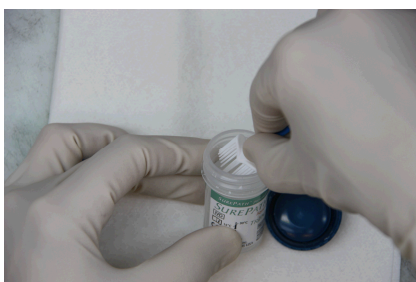

Børstehovedet adskilles fra håndtaget ved at trykke tommelfingeren mod ryggen af børsten

Bemærk:

- 1) Undgå berøring af børstehårene
- 2) Undgå væskespild fra beholderen, da **hele** væskemængden er afgørende for udførelse af den efterfølgende analyse

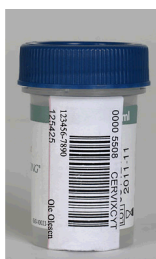

Skrulåget **helt fast** på beholderen, så væsken ikke løber ud under transporten

Mærk beholderen med patientens navn og CPR-nr.

Materialet sendes til Patologisk Institut, Aalborg Sygehus.

I webreq registreres beholderen ved at markere feltet HPV-test under indikation eller der noteres i Klinisk info-felt, at der er sendt materiale til HPV-test.

Materialet sendes til Patologisk Institut, Aalborg Sygehus. I Region Nordjylland anvendes NorChip's RNA-test og DNA-test fra Roche.

Medsendt kombibørste og beholder med fiksativ (SurePath)

Eventuelle spørgsmål vedr. forsendelse kan stilles til cytobioanalytiker Mai-Brit Lanng
cytobioanalytiker Signe Larsen tlf. 99321641.

Med venlig hilsen

Den Regionale styregruppe for livmoderhalskræftscreening
Region Nordjylland