


Parring af ICD og Merlin-hjemmemonitor fra St. Jude

1. Fjern telefonkabel bag på monitor
2. Sæt GSM-senderen i USB-porten og hægt GSM-modulet på bagsiden. Se figur
3. Monitor sættes til strøm
4. Lad monitoren starte op. Det tager nogle minutter. De gule lamper blinker fra venstre til højre.



5. Derefter tænder symbolet for datalæsning. Alle lamper blinker og monitoren bipper
6. Hold monitoren rettet mod ICDen i en armslængde
7. Tryk på startknappen. Alle lamper blinker og monitoren bipper. Der er lys i symbolet for datalæsning.

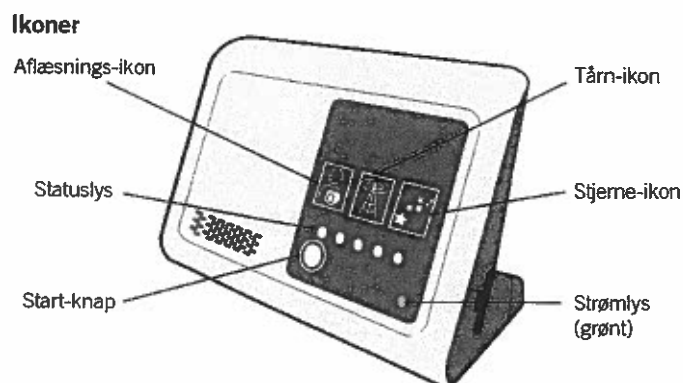

8. Derefter tænder symbolet for datasending (Tårn-ikon). Lamperne blinker fra venstre til højre, og monitoren bipper. Sendingen tager nogle minutter.
9. Når monitoren holder op med at bippe, og symbolet med stjerner tænder, er sendingen afsluttet
10. Symbolet med stjernerne slukker efter nogle minutter og det er nu kun det grønne strømlys, der er tændt

Lad altid monitoren være tilsluttet strøm og GSM-adapter. Monitoren kan nu sende alarmer automatisk og pacemakerambulatoriet kan trække schedulerede sendinger.

Hvordan laver du selv en aflæsning af din ICD til pacemakerambulatoriet

Hvis du har brug for selv at sende en aflæsning af din ICD til os, skal du altid ringe til pacemakerambulatoriet og fortælle, at du enten gerne vil sende, eller at du har sendt.

(Se billedet af senderen med de forskellige ikoner)

1. Tryk på startknappen og slip den hurtigt.
2. Senderen bipper og stjerne-ikonet lyser.
3. Sæt dig foran senderen
4. Tryk på startknappen igen og slip den hurtigt.
5. Senderen bipper og aflæsnings-ikonet tænder, når senderen er kommet i kontakt med din ICD
6. Bliv siddende i nærheden af senderen, så længe aflæsnings-ikonet lyser
7. Når tårn-ikonet tænder, behøver du ikke længere at opholde dig foran senderen. Senderen er nu i gang med at sende data.
8. Når stjerne-ikonet tænder er data sendt. Stjerne-ikonet forbliver tændt i 1 minut