

Actioncard for hjemmesygeplejersker


- Hånddesinfektion / håndvask.
- Injektionsport/membran desinficeres mekanisk med klorhexidinsprit 0,5% (uden glycerol) i min. 5 sec. før brug.
- Sikre at klemskrue ALTID er lukket, når kateteret er "åbent".
- Træk tilbage (sikrer at katetret ligger korrekt).
- Sprøjt igennem med 10 ml NaCl 0,9%.
- Tilslut medicin.
- Efter medicinadministration gennemskylles med 20-30 ml. NaCl 0,9%.
- Påsæt ny steril prop (hvis ikke der er påsat injektionsmembran).
- Hånddesinfektion / håndvask.

HEPARINISERING:

- Kun nødvendig, hvis kateteret ikke bruges igen indenfor 24 timer. Herefter hver 7. dag.

SKIFTNING:

- Injektionsmembran skiftes hver 4. dag, eller ved synlig forurening/blod hvis kateter anvendes, - ellers 1 gang om ugen.
- Forbinding og Statlock skiftes 1 gang om ugen, eller hvis urent eller beskadiget.

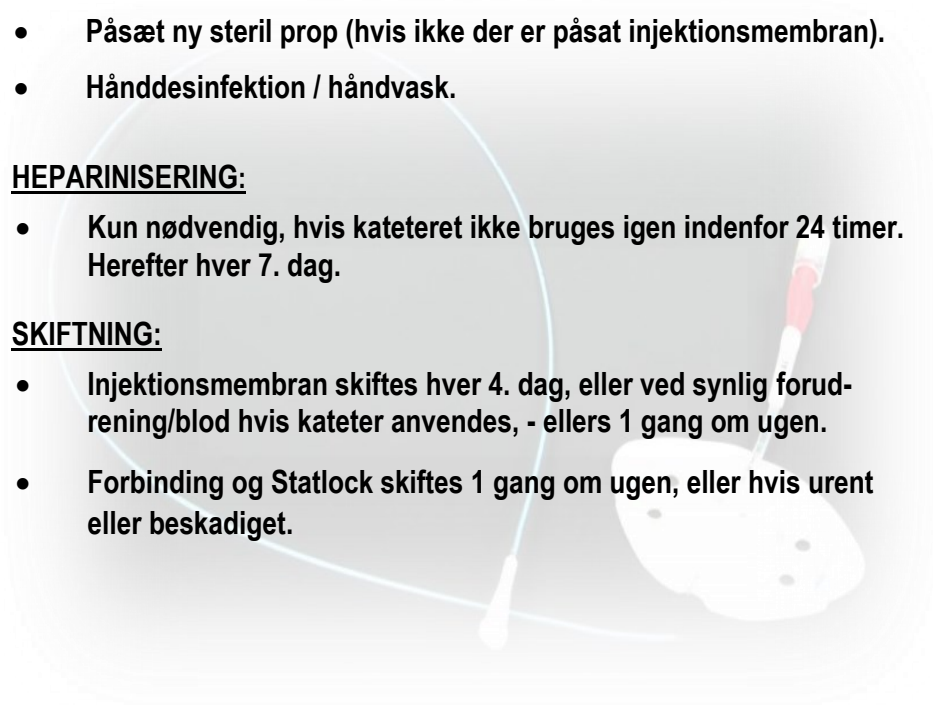

Actioncard for hjemmesygeplejersker

BADNING:

- Klip plastpose til rør, sæt ud over forbindelse og tape på hver side.

SEPONERING AF KATETERET:

- Træk forsigtigt i venens retning. Ved modstand prøv evt. at skylle eller varmt omslag på armen. Komprimér 2-3 minutter.
Ved mistanke om infektion sendes kateterspidsen til dyrkning.

I TILFÆLDE AF TILSTOPNING - trin for trin:

- Luk klemskruen og tag injektionsmembranen af; Forsøg nu gennemskylning uden.
- Tjek knæk på slange, alle haner åbne osv.
- Bed patienten løfte arme skiftevis, rejse sig, sætte sig, rømme sig.
- En simpel gennemskylning med 10-20 ml NaCl kan være nok til at genoprette kateterets funktion.
- Forsøg med 2 ml NaCl i 10 ml sprøjte; Træk stemplet let tilbage og slip. Undertrykket kan evt. gavne (= TOP-metoden)
- Prøv med heparinlås (5 ml Heparin 100 ie/ml).
- **For telefonvejledning:**
Ring til vagthavende anæstesisygeplejerske på 97650451
- **For tilsyn:**
Ring til visitator på 97650543 i Akutmodtagelsen.