


Sådan bruger du NovoPen Echo®

Med denne brugervejledning vil vi vise dig, hvordan du injicerer dig selv eller dit barn med NovoPen Echo®. Pennen fås i rød og blå, så hvis du får to forskellige typer insulin, er det nemt at kende forskel på dem. Pennens hukommelse registrerer, hvor mange doser der sidst blev injiceret og hvornår – så det bliver nemmere at holde styr på.

NovoPen Echo®

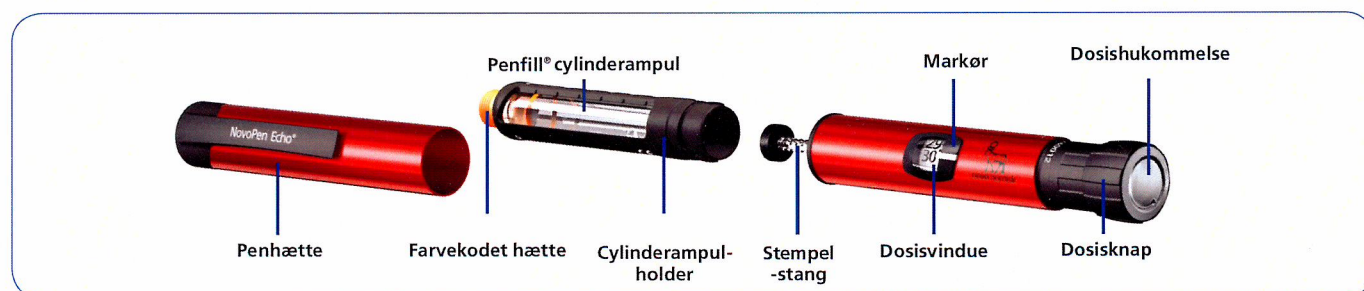

Forberedelse af NovoPen Echo®



- Træk penhætten af og drej pennen, så den skilles i to (Fig. 1).
- Hvis stempelstangen stikker ud, tryk den i bund (Fig. 1).
- Læg ampullen i holderen med den farvede ende først (Fig. 2).
- Skru pennen sammen indtil du hører eller mærker et klik (Fig. 3).
- Er insulinen uklar, vend den før brug og følg indlægssedlen for den enkelte insulin.
- Skru en ny nål på. Fjern både den yderste og den inderste nålehætte (Fig. 3), og gem den større yderste nålehætte til senere brug.

Klargøring af NovoPen Echo®



- Træk dosisknappen ud (Fig. 4) og drej den, indtil markøren viser et tal:
 - 4 hvis du bruger en ny ampul
 - 1 hvis ampullen allerede er i brug
- Hold pennen så nålen vender opad og bank let på ampulholderen et par gange så eventuelle luftbobler samles i toppen af ampullen (Fig. 5).
- Hold fortsat pennen lodret og tryk dosisknappen helt i bund, indtil dosisvinduet viser 0, og den siger klik (Fig. 6).
- Gentag step 4 og 6 indtil der kommer en dråbe frem på spidsen af nålen (Fig. 6). Hvis der ikke kommer en dråbe, så skift nålen og gentag processen.