


Sådan bruger du NovoPen Echo®

Vælg din dosis

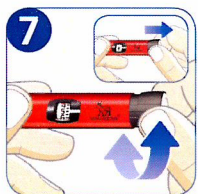


- Træk dosisknappen ud og drej den, indtil den ønskede dosis står ud for markøren (Fig. 7). Dosisknappen kan drejes tilbage, hvis man har valgt en forkert dosis.
- Insulinen frigives, når der trykkes på dosisknappen

Injektion af din dosis



- Sæt pennen mod din hud eller dit barns hud og tryk dosisknappen helt ind, indtil du mærker eller hører et klik og markøren viser 0 (Fig. 8). Tæl til ti og fjern derefter nålen.
- Sæt den store ydre nålehætte tilbage på nålen, skru den af og kassér den i en kanylebeholder.

Dosishukommelse

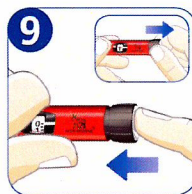

- For at aktivere dosishukommelsen for enden af dosisknappen, træk dosisknappen ud og tryk den tilbage igen (Fig. 9).
- Dosishukommelsen vil nu vise, hvor mange enheder der blev injiceret sidst, og en sort bjælke kommer til syne i kanten for hver time, der er gået siden den sidste injektion (Fig. 10). Hvis den sidste injektion ligger 12 timer eller mere tilbage, så vil den sorte bjælke gå hele vejen rundt på displayet.

Se venligst brugervejledningen til NovoPen Echo® for flere detaljer.