

## Opredning til ryg bugleje stue 7

1 stk. lejelagen (evt. 2 stk.)

1 stk. grøn op-styk

2 stk. alm. pudebetræk

2 stk. små pudebetræk

---

### Kulfiber leje

Armbords holder (kulisseramme til hoved ende)

2 stk. armborde m/ tempur puder

2 stk. thorax puder

1 stk. vene pude


2 stk. skråpuder (gul)

2 stk. firkantede puder (80x50)

2 stk. halve knæ puder (små)

1 stk. hovedholder m/ indlæg (blå/hvid)

1 stk. firkantede pude (50x30)

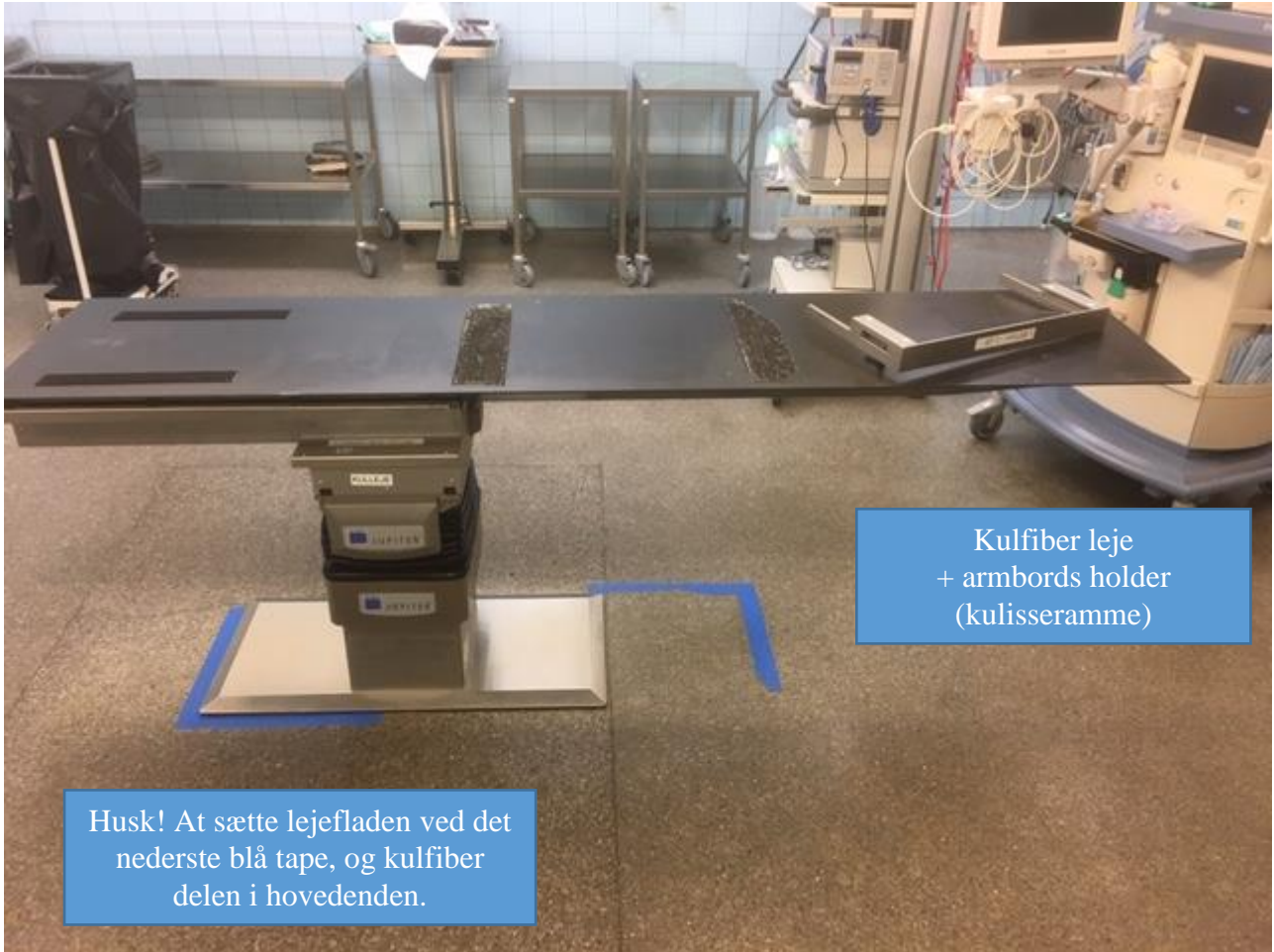

Kulfiber leje  
+ armboards holder  
(kulisseramme)

Husk! At sætte lejepladen ved det  
nederste blå tape, og kulfiber  
delen i hovedenden.



Armbordsholder (kulisseramme)



Det betræk der skal bruges.



De puder der skal bruges,  
+ armbord.



Armborde.



Tempur arm puder.



1 stk. firkantede pude (80x50)





2 stk. gule skråpuder.

Venepude.






1 stk. firkantede pude (80x50)

1 stk. thorax pude  
+1 stk. firkantede pude  
(50x30)



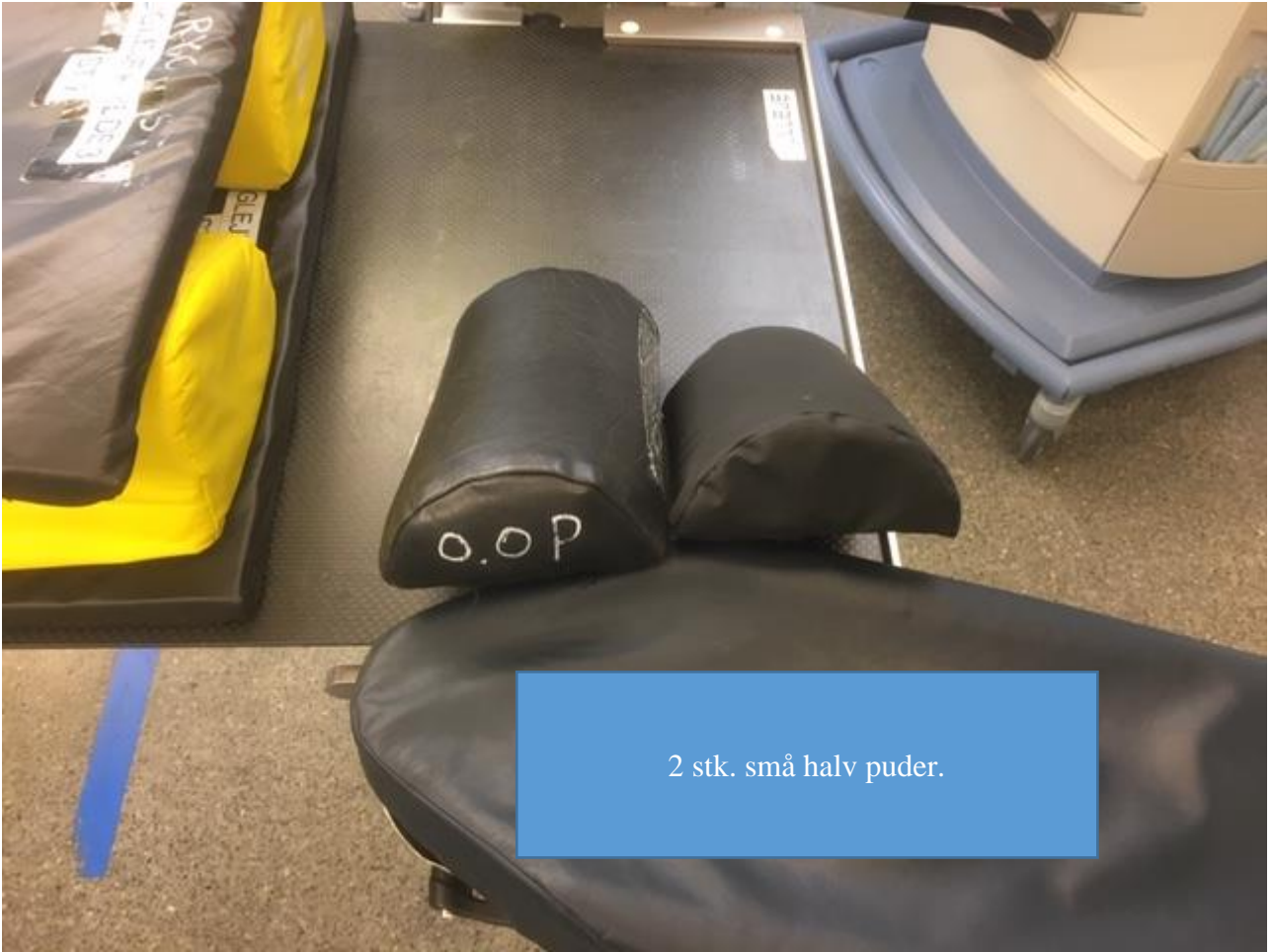

2 stk. små halv puder.



2 stk. alm. pudebetæk




2 stk. små pudebetræk på halvpuder.




Lejelagen bukkes ned om venepude / omkring thorax pude i begge ender.




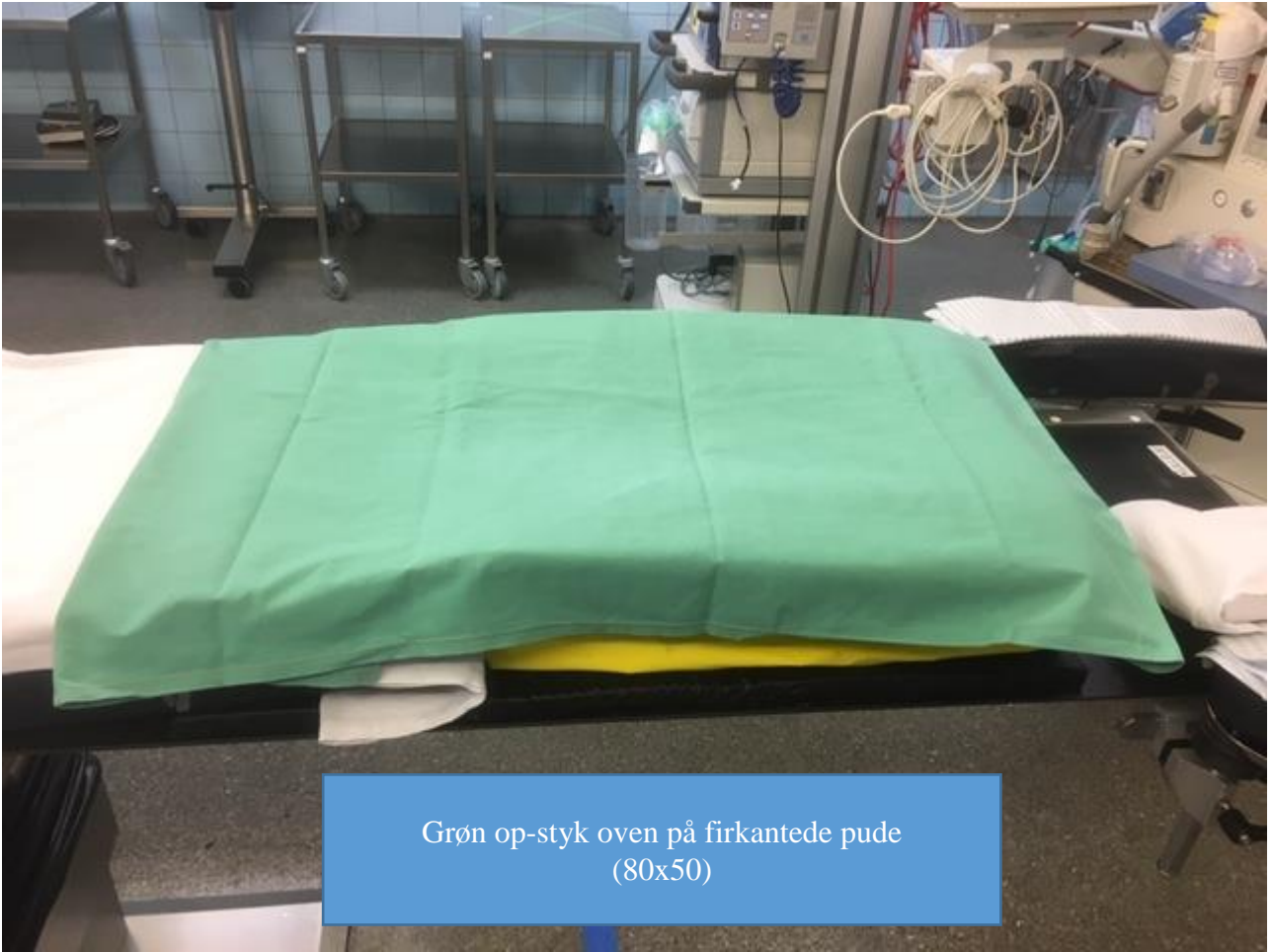


Grøn op-styk oven på firkantede pude  
(80x50)

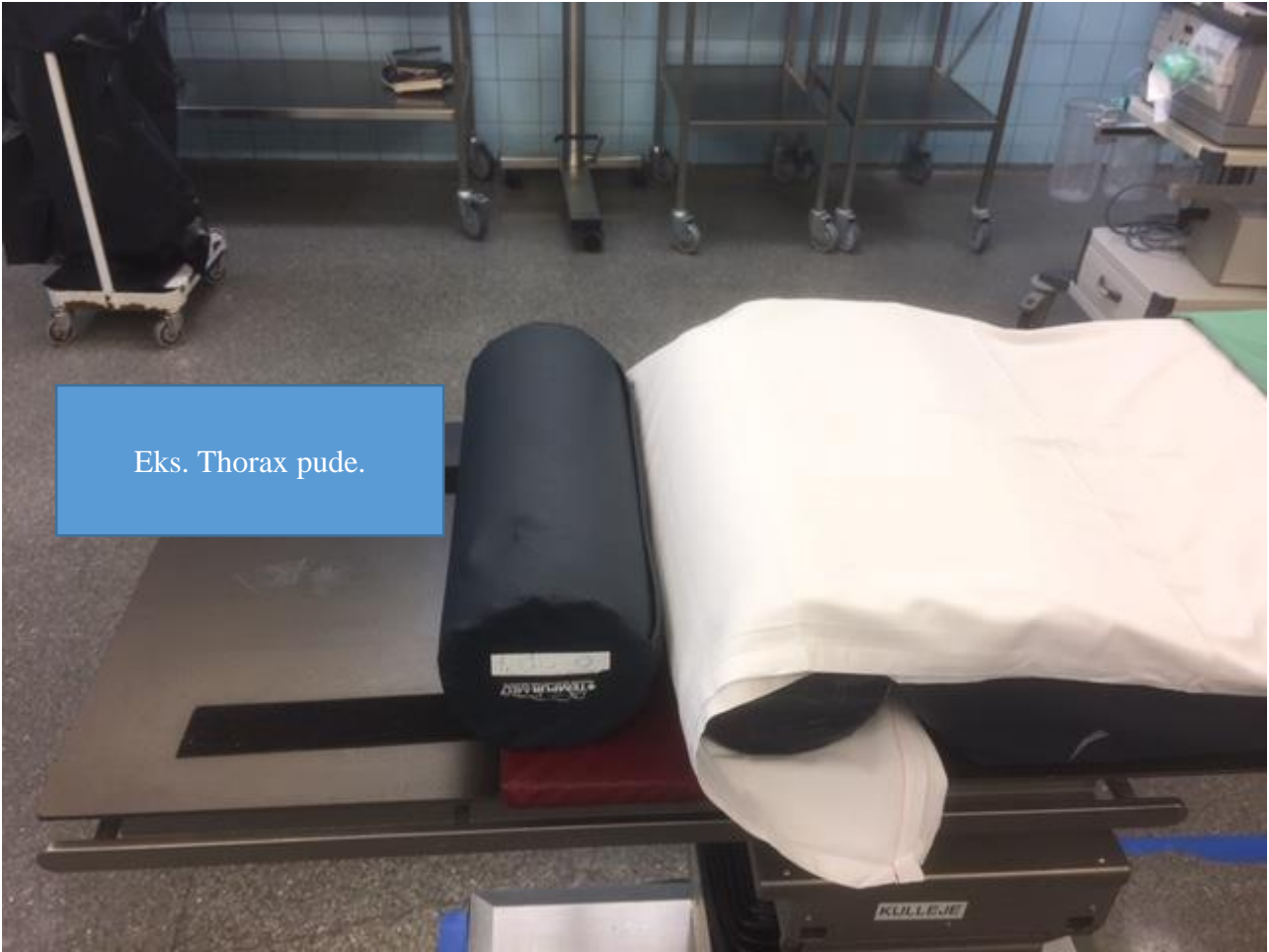

Eks. Thorax pude.

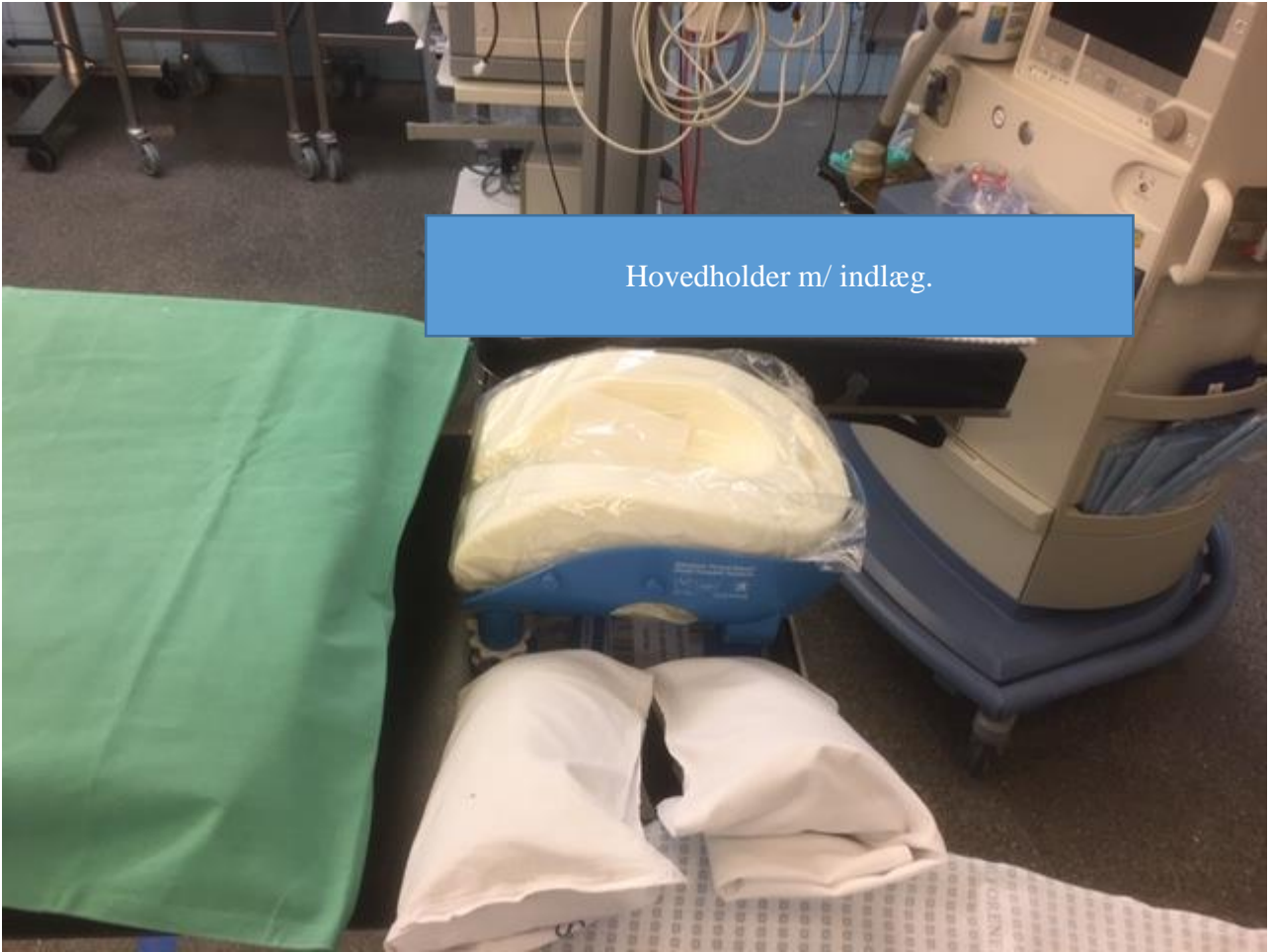

Hovedholder m/ indlæg.

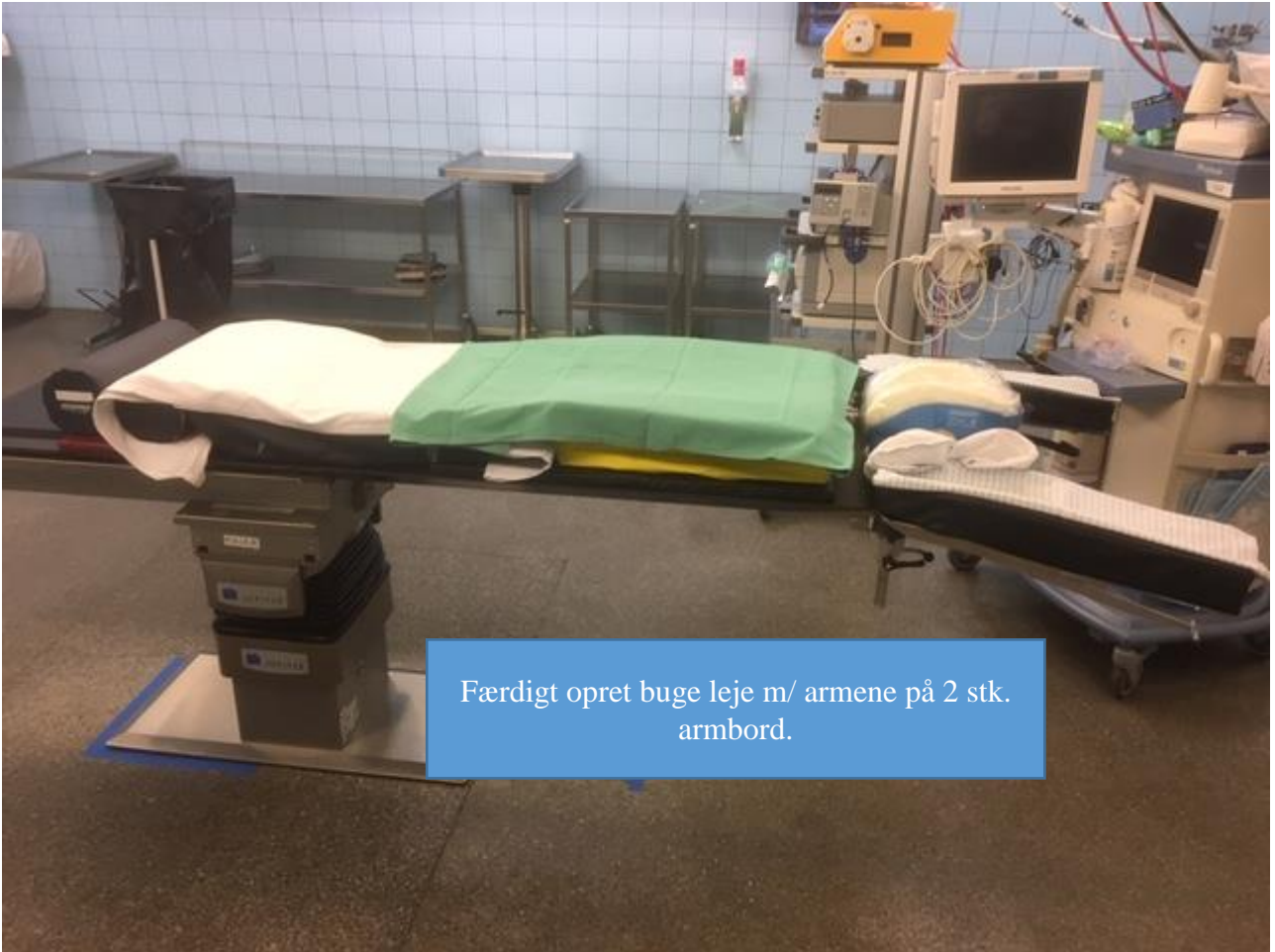

Færdigt opret buge leje m/ armene på 2 stk. ambord.





Lejelagen, hvis armene skal lejres langs siden.





Færdigt bugleje med armene langs siden.





Opredning til ryg bugleje stue 7, Ejnar Ejning den 15-11-2019.