


P-CMV


P-CMV er et trykkontrolleret modus, hvor patienten kan ventileres både som sovende og vågen. Klinikeren indstiller P-kontrol, Frekvens, PEEP/CPAP, I:E ratio og FiO₂. Respiratoren ventilerer med de indstillede tryk, men garanterer ikke et bestemt minutvolumen. Det vil afhænge af patientens compliance og modstand.

Der er derfor heller ikke garanti for, at respiratoren ikke blot ventilerer patientens deadspace.

Patienten har mulighed for at trigge respiratoren i det omfang, patienten er vågen til det. Når patienten er spontant ventilerende kan man ofte overgå til SPONT.

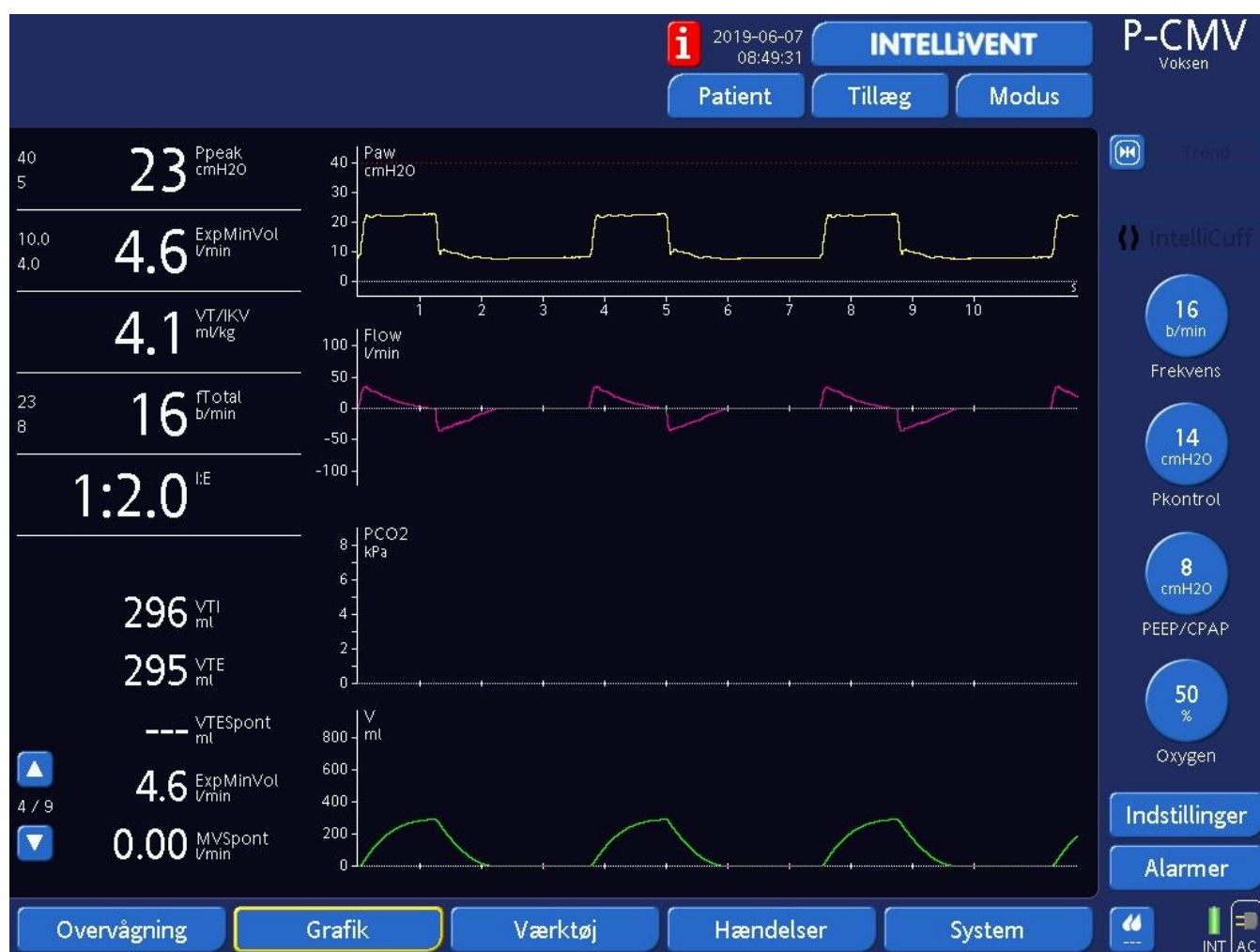

At patienten trigger respiratoren ses ved de lyserøde/gule trekanten, som indikerer enten flow eller tryktrigning.

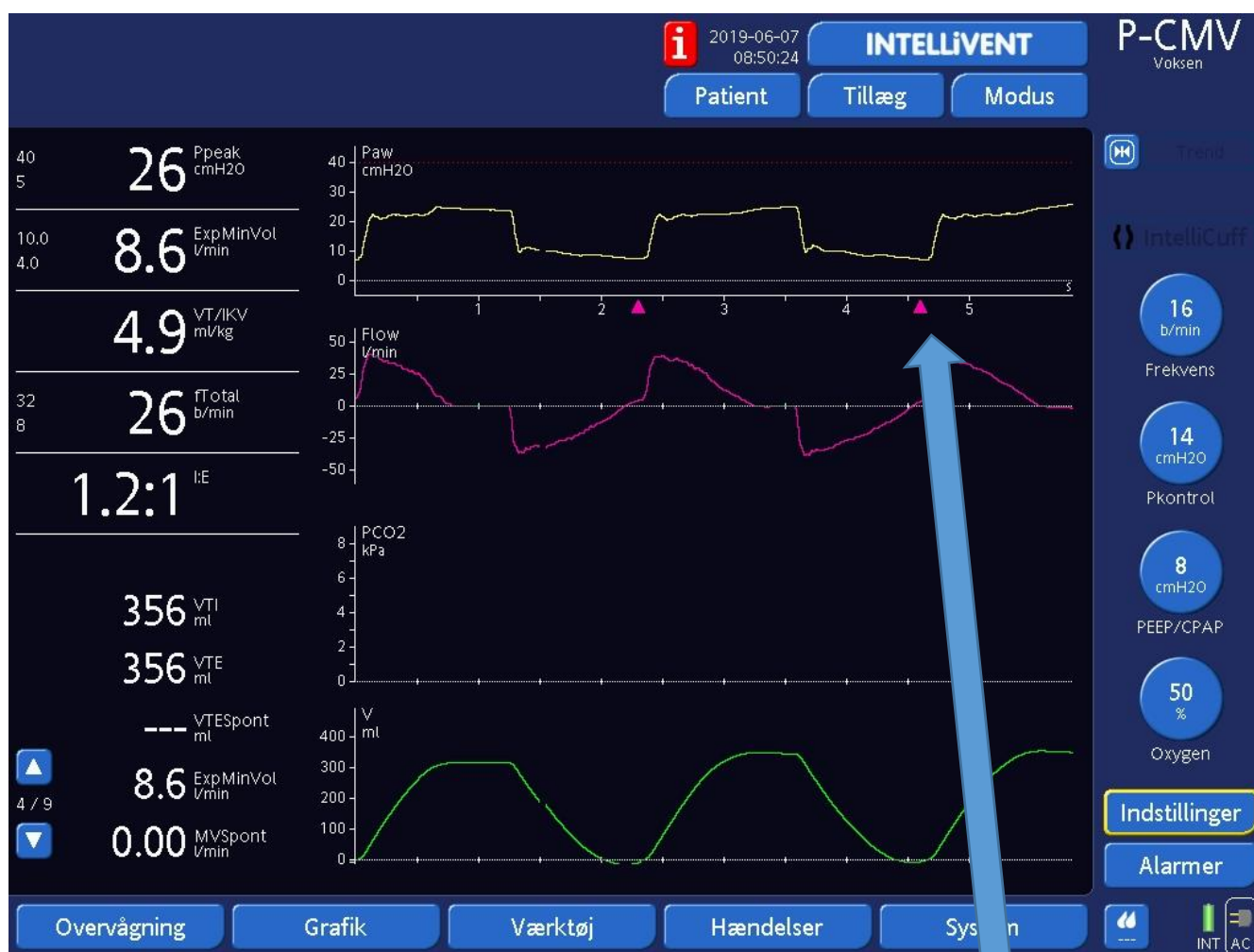

Indikator for trigning

Forslag til startindstilling for P-CMV

Frekvens 15-25

Pkontrol 10-20

PEEP/CPAP 5-15

I:E ratio 1:2 (standard indstilling)

Oxygen efter behov

Vær opmærksom på, at respiratorindstillingerne skal lægeordineres

Specielle observationer

I P-CMV skal man rette opmærksomheden mod patientens tidalvolumen og minutvolumen. Maskinen ventilerer med det samme tryk, men der kan være forhold der ændrer, hvor meget luft patientens reelt får ned i luftvejene. Det kan for eksempel være at patienten omlejres, hoster eller får sekret i luftvejene.

Tip: indstil alarmgrænserne, så man gøres opmærksom på et faldende tidalvolumen eller minutvolumen.