




## Arixtra sikkerhedsprøjte består af følgende dele:


- ← Stift hylster til kanylen
- ↑ Hætte
- Stempel
- ↓ Fingerstøtte
- Sikkerhedsmanchet

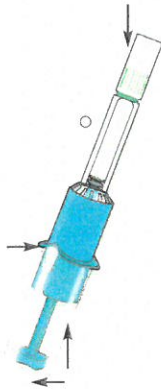

Kanyle  
FØR  
BRUG



Kanyle  
EFTER  
BRUG

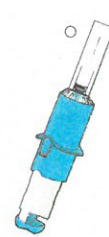

1. Fjern hæften, som beskytter stempellet, ved at trække den af (fig. 1).



Figur 1

2. Fjern hylstret fra kanylen ved først at dreje det og dernæst trække det direkte af (fig. 2).  
**Den lille luftboble må ikke fjernes før injektionen.**



Figur 2

3. Dan en fold i huden med et let greb. Hold folden mellem tommel- og pegefinger under hele injektionen (fig. 3).



Figur 3

4. Indfør kanylen i hele dens længde vinkelret (i en vinkel på 90°) på hudfolden (fig. 4).



Figur 4

5. Tøm sprøjten HELT ved at trykke stempellet helt i bund (fig. 5).



Figur 5

6. Slip dernæst stempellet. Kanylen vil automatisk trække sig ud af huden og op i en sikkerhedsmanchet, hvor den fastlåses permanent (fig. 6).



Figur 6

7. Undlad at sætte hylstret tilbage på kanylen.